


m y s é

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器 ミーゼ クレンジリフト MS-70

	はじめに……………	1
	安全上のご注意……………	1
	各部のなまえとはたらき……………	15
	お使いになる前に……………	17
	使いかた……………	23
もくじ	使い終わったら……………	29
	お知らせ……………	33
	● 故障かな?と思ったら……………	33
	● よくあるご質問……………	35
	● 製品仕様……………	39
	アフターサービス……………	40

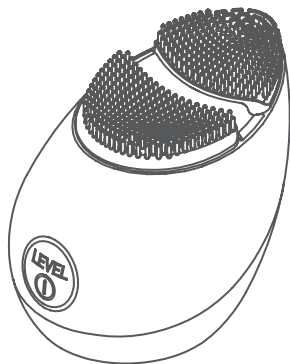

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険（ご使用、保管に関して）

● 次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人
- ・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
- ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌、お肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・強度近視の人（-6D以上）・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人および治療中の人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中の人・眠気をさそう薬を服用中の人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・合成樹脂でかぶれたことのある人・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる人



禁止



警告（ご使用、保管に関して）



禁止

● 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- ・カユミやほてりのある部位・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ
- ・インプラントの上・眼球・まぶた・頭部

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

● 過剰な連続使用はしない。（業務用としての使用など）

けが・発熱などの原因となります。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。

● 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

警告（ご使用、保管に関して）

- サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。
 - 水中に沈めたり、放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで充電したり、放置しない。
内部に水が入り、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
-
- 本体や充電台およびケーブルは乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故やけがの原因となります。
 - 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用する。
感電やけが・やけどの原因となります。
 - 衛生面を考慮し、複数人での共有使用はしない。
-
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
けがや故障の原因となります。



禁止



使用者の
制限



用途以外
禁止

警告（ご使用、保管に関して）

● 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

本製品は一度分解すると防水機能が保持でき無くなります。



分解禁止

● 異臭・異常発熱したときは使用しない。

破損・発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

● 火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所で使用・充電したり、放置しない。

また、熱器具に近づけない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



発火注意

警告（ご使用、保管に関して）

- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。



落下禁止

- 不安定な場所に置かない、充電しない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすと破損・発火の原因となります。

-
- 電子レンジや高圧容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

-
- 充電するときは乾いた布などで本体や充電台の水気をしっかりと拭き、
充電する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



必ず守る

注意（ご使用、保管に関して）

- 電極部を金属・物にあてない。
発熱・発火・故障・破損の原因となります。
- 本体にヒビや破損、不具合がある場合は使用しない。
お肌を傷める原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯で使用しない。
故障の原因となります。
- 電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。
家具などの破損や、けがの原因となります。
- ブラシ電極部分を鋭利なもので触れたり、引っ張ったりしない。
故障の原因となります。
- 本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。
本体が変形したり溶けたりする原因となります。



禁止

注意（ご使用、保管に関して）

- 電源をオンにした状態でほかの電気製品に接触させない。また電熱器具（電気毛布・こたつ）など熱源に近づけない。
けがや故障の原因となります。
- オイル類は絶対に使用しない。
故障の原因となります。
- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。
- スクラブ入りやピーリング作用のある洗顔料は使わない。
お肌を傷めたり、故障の原因となります。
- 使用した後に本体が濡れている場合は、ブラシ電極を下に向けて振り、本体についた水分を取り除く。使用後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させる。
故障の原因となります。
- ペットには使用しない。
けがの原因となります。



禁止

注意（ご使用、保管に関して）

- 必ずメイクを落として使用する。

メイクの上から使用すると、ブラシ電極の劣化や、お肌が黒く汚れる原因となります。

- 同一部位に10分以上の使用は避ける。

再度、同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。

- 以下の項目は必ず守る。

事故やけが、本体の故障原因となります。

- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源をオフにする。



必ず守る

注意（ご使用、保管に関して）

- 使用中に気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- EMSを初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1（クレンズリフトモードはレベル2）から使用する。また、EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。

レベルは少しずつ調節してください。事故やけがの原因となります。

- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または洗顔料・ローション・ジェルなどでお肌を湿らせてから使用する。そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。

注意（ご使用、保管に関して）

- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.29)を参照して、製品に付着した洗顔料や化粧品などを取り除く。

そのまま使用すると、肌トラブルや故障の原因となります。

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げるか部位をずらして使用する。

EMSにより、おでこ・ほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、使用を中止してください。また、違和感が続く場合は医師にご相談ください。



必ず守る

警告（電源に関して）

- 充電台およびケーブルが傷んでいるときや、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはUSBプラグをすぐに抜く。

けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

- ケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 充電台およびケーブルに水や液体がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

万一こぼれたときは、ショートや感電のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水かけ禁止

警告（電源に関して）

- 充電台およびケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、充電台およびケーブルが破損する原因となります。



無理な扱い
禁止

-
- 充電端子とUSB端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



必ず守る


- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合はUSB端子を抜く。

各部のなまえとはたらき

本体

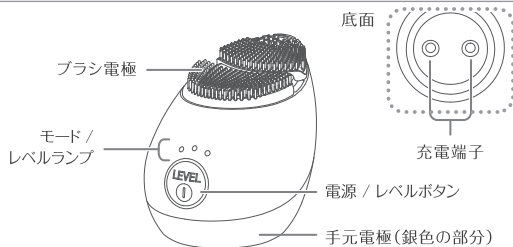

付属品

●充電台



はたらき

EMS

電氣的に筋肉を刺激します。

振動

細かなバイブレーションにより、お肌を優しく
タッピングし、ケアをサポートします。

イオン導入

イオンの力で化粧水をよりお肌に浸透^{※1}させる
ことができます。

※1角質層まで

イオン導出

洗顔では落としきれない汚れを、イオンの力で
吸着することができます。

防水仕様

本体はIPX7の防水仕様となっています。浴室
など水まわりでの使用もできます。

※充電台は防水仕様ではありません。

オートオフ機能

モード・レベルを設定してから、クレンジリフト
モードは約3分、モイストリフトモードは約10分が
経過すると、ブザー音（ピーピー）が鳴り、自動
的に電源がオフになります。使用途中で変更す
ると、オートオフタイマーがリセットされるため、
使用時間にご注意ください。

1分タイマー機能

<クレンジリフトモード
時のみ>

クレンジリフトモード使用时、1分経つとブザー音
（ピーピーピー）でお知らせします。

お使いになる前に

モードについて

モード	用 途	機 能	レベル	1回の使用時間目安	使用頻度目安
クレンジリフト モード	お肌の汚れをとりたいときに	イオン導出 EMS 振動	3段階 (レベル1は振動のみ)	1分 (全顔3分以内)	週2～3回 ※レベル1は毎日の使用可
モイストリフト モード	お肌に潤いをあたえたいときに	イオン導入 EMS 振動	3段階	3分 (全顔10分以内)	週2～3回

※お肌の状態をみながらご使用ください。

使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)は、必ず外してください。

アクセサリー類を巻き込むおそれがあります。

- 必ずメイクを落として使用してください。

メイクの上から使用すると、ブラシ電極の劣化や、お肌が黒く汚れる原因となります。

- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください(P.21)。

- 本製品を使用するときは、洗顔料、ローション、ジェルなどでお肌を湿らせてから、直接お肌にあててください。

オイル類は絶対に使用しないでください。

- 以下の使用時間、使用頻度を目安にご使用ください。


クレンジリフトモード:1日1回1分(全顔3分以内)、モイストリフトモード:1日1回3分(全顔10分以内)、週に2～3回を目安にお使いください。

(クレンジリフトモードのレベル1は毎日の使用も可能です。)


※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

充電する

家庭用コンセントを使用する

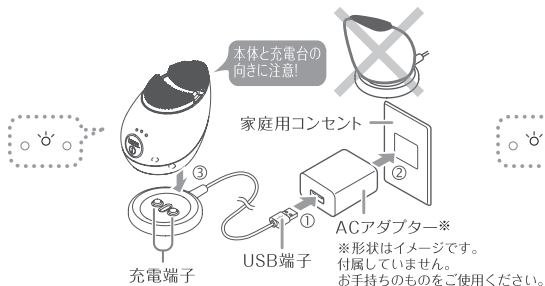

パソコンを使用する

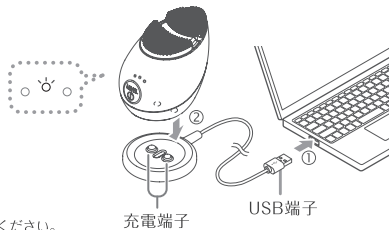

- ・ 本体を充電台に置くと充電が開始されます。充電中は中央のレベルランプが赤く点滅します。充電が完了すると10秒間点灯した後、消灯します。
※本体を充電台に置くときは、充電端子の位置を合わせてください。
本体の背面側に充電台のケーブルがくる向きで置いてください。
 - ・ 室温約25℃の場合、約2時間で満充電となり、約3時間半動作できます。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
 - ・ 使用中に中央のLEDが点滅し、ブザー音(ピッピッピッピッピッ)が鳴りましたら、充電してください。
-

ご注意

- ・ 本体、充電端子、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- ・ 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。



注意

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

1

腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る。

2

洗ったところに洗顔料を塗り、
クレンジリフトモード、レベル2で
約3分間使用する。(P.24)

必ずレベル2でテストを行ってください。
レベル1はイオン・EMS機能がありません。



3

お肌に異常がないこと
を確認する。

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。

持ちかた

手元電極



手元電極(銀色の部分)が
触れるように持ちます。

使いかた

基本的な使いかた


必ずメイクを落としてから使用してください。メイクの上から使用すると、ブラシ電極の劣化や、お肌が黒く汚れる原因となります。

1

電源をオンにする。

電源/レベルボタン ① を約3秒長押しします。


※電源オン時は安全のためレベル1に設定されています。

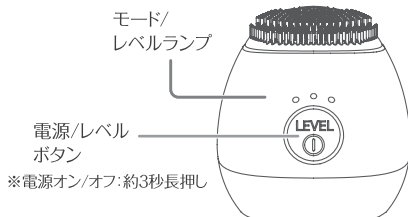

2

モード・レベルを選ぶ。

電源/レベルボタン ①を押すたびにモードとレベルが切り換わります。(2モード・レベル1～3)
 レベルランプの点灯・点滅でレベルの確認ができます。
 点灯色は全て赤でお知らせします。

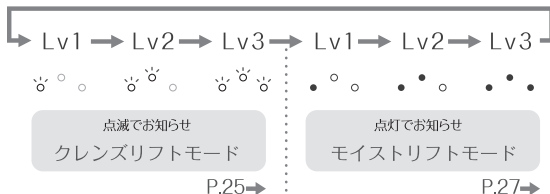

注意

- 無理のないレベルを選んでご使用ください。
- クレンジリフトモードのレベル1は、EMS・イオンの出力がありません。振動のみの仕様です。
- モード・レベルを設定した時点から、クレンジリフトモードは約3分、モイストリフトモードは約10分後にブザー音が鳴り(ピーピー)、自動的に電源がオフになります。

使用途中で変更するとオートオフタイマーがリセットされるため、使用時間にご注意ください。

1日1回1分(全顔3分以内)

週に2～3回目安

※レベル1は、毎日ご使用いただけます

基本的な使いかた [クレンズリフトモード]

必ずメイクを落としてから使用してください。

3

矢印に沿って動かします。

ブラシ電極と顔をしっかり濡らし、ブラシ電極または顔に普段ご使用の洗顔料(オイル系は除く)を塗布します。

1分経つとブザー音(ピーピーピー)でお知らせします。

よく泡立てた
洗顔料が
オススメです

POINT!

気になる部分は円を描く
ように動かしましょう



使用できない部位



4

本体の電源をOFFにして(長押し約3秒)、お肌と本体についた洗顔を洗い流す。

使用後は、ブラシ電極も必ず洗ってください。(P.29)

ご注意

- ・額はEMSの刺激を強く感じる場合があります。
- ・ブラシ電極は強くこすりつけないでください。
- ・オイル系は使用しないでください。
- ・お肌に強く押しあてないでください。
- ・お肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

1日1回3分(全顔10分以内)
週に2～3回目安

基本的な使いかた [モイストリフトモード]

必ずメイクを落としてから使用してください。

3

スタンプを押すように、矢印に沿って動かします。

お肌に化粧品を塗布します。

とろみのある化粧品がおすすめです。

ブラシ電極全体をお肌にあててください。

約4秒押しあてて、次の箇所に移動してください。

POINT!

気になる部位には30秒
ほど止め、表情筋を刺
激しましょう


- ①目もと…こめかみ
- ②口もと…鼻横
- ③フェイスライン…耳下線
- ④肩…首のつけ根



使用できない部位



約4秒押しあてて、次の箇所に移動してください。

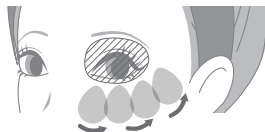

顔にスタンプを押すように
「押しあて→離す→移動」を
繰り返してください。

4

本体の電源をOFFにして(長押し約3秒)、本体をお手入れする。

使用後は、ブラシ電極を必ず洗ってください。(P.29)

ご注意

- ・額はEMSの刺激を強く感じる場合があります。
- ・オイル系は使用しないでください。
- ・お肌に強く押しあてないでください。
- ・お肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
- ・お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

使い終わったら

本体のお手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回汚れを取り除いてください。

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。



警告

- お手入れするときは、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 決して分解しないでください。

1

ブラシ電極はぬるま湯または水と、石鹼で洗い、
流水でよく洗い流す。


汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布でやさしく拭いてください。

2

水気を切り、残った水分をタオルなどの乾いた布でやさしく拭き取る。

水気を切る時は、ブラシ電極部分を下に向けて振ってください。

布などを強くこすりつけると色移りする場合があります。

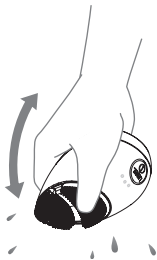

ご注意

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ブラシ電極は鋭利なもので触れたり、引っ張らない。
- 熱湯は使用しない。
- 水中に沈めない。



3

風通しの良い場所で乾燥させる。

直射日光には当てないでください。

充電台のお手入れのしかた

- 充電台は防水ではありませんので、水がかかると故障の原因となります。乾いた布などで水滴、汚れを拭き取ってください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは充電台のUSB端子を、ACアダプターやパソコンから抜いて保管してください。
- 火のそばや直射日光の下、浴室など高温多湿の場所や、不安定な場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.33)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.40)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

電源が入らない



電源/レベルボタンを長押し(約3秒)してください。



電池残量がありません。充電してください(P.19)。

充電しても数分しか使えない



電池残量が少なくなっています。充電してください(P.19)。



電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.40)にご連絡ください。

充電が開始されない



ACアダプターのプラグを壁面コンセントに差し込んでください(P.19)。



USB端子とパソコンを正しく接続してください(P.19)。



本体と充電台の充電端子を合わせ、正しい向きでセットしてください(P.19)。

電源がオフになる



オートオフ機能があります。クレンジリフトモードは約3分、モイストリフトモードは約10分経過すると、自動でオフになります(P.16)。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

EMSが強い
(ピリピリする・痛い)



設定レベルが高いため、レベルを下げてください。
初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。(クレンジリフトモードはレベル2)

EMSが弱い・感じない



設定レベルが低いため、レベルを上げてください。



ブラシ電極全体をお肌にあててください。



洗顔料またはローション、ジェルなどを足してください。



洗顔料を多めに使用し、充分泡立てた状態でご使用ください。



電池残量が不足している場合は、充電してください。



クレンジリフトモードのレベル1は、出力がありません。

イオンが弱い・感じない



感じ方には個人差がありますが、イオンは体感がほとんどありません。

よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A

クレンジリフトモード:1日1回1分(全顔3分以内)、モイス
トリフトモード:1日1回3分(全顔10分以内)、週に2~3回
が目安となっております。(クレンジリフトモードのレベル1
は毎日の使用も可能です。)※お肌の状態をみながら
ご使用ください。

Q 力を入れてブラシ電極で
擦る方が良いですか？

A

力を入れすぎるとお肌を傷める原因になります。特に
顔へのご使用は力を入れずにやさしく滑らるようにし
てください。

ご自身が心地よく感じる強さで滑らせてください。

Q お風呂で使用できますか？

A

本体は防水仕様ですので、お風呂・シャワー時にご
使用いただけますが、水中に沈めないでください。故
障の原因となります。

※充電台は防水仕様ではありません。

よくあるご質問

Q サウナや岩盤浴で使用できますか？

A

サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

Q お肌が乾いた状態でも、イオン・EMSは使用できますか？

A

お肌が乾いた状態では、刺激を感じにくくなる場合があります。
EMSが弱いと感じる場合は、お肌を水またはローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。

Q 敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？

A

使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q メイクの上から使用できますか？

A

メイクを落としてからご使用ください。メイクの上から使用すると、ブラシ電極の劣化や、お肌が黒く汚れる原因となります。

よくあるご質問

Q 肌に発疹、炎症、カユミが出たのですが？

A お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが？

A 顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが？

A 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げるか部位をずらして使用してください。違和感がある場合は、医師にご相談ください。

Q 妊娠中は使用できますか？

A 妊娠中や出産直後には使用しないでください。

よくあるご質問

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A

炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 製品表面のシリコンゴムが劣化し、気泡ができたり、粘着性があるのですが？

A

使用を中止してください。シリコンゴムの耐久は比較的高いですが、特定の条件下で劣化します。ヤーマンコールセンター(P.40)へご相談ください。

Q オイル系の化粧品は使用できますか？

A

使用できません。EMSなどの刺激を感じにくくさせたり、シリコンブラシ電極を劣化させるためです。

製品仕様

電 源	DC5V 0.5A
消 費 電 力	約1.5W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
防 水 機 能	IPX7
外 形 寸 法	本体:約W54×D69×H60(mm)
製 品 質 量	本体:約80g
材 質	本体:ABS樹脂(ニッケルメッキ)、シリコーン 充電台:ABS樹脂、シリコーン、ネオジム磁石
製 造 国	中国
付 属 品	充電台(USBケーブル付:長さ約1m、Type-A) 1個 取扱説明書(保証書付)

アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

固定電話など

 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

 0570-550-637 (通話料有料)

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.40)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定

5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ)電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト)車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ)お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ)保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ)保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

P.47(裏表紙)保証書に記載の「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4



www.ya-man.com

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-70
形名	ミーゼ クレンズリフト		
無料 修理 保証	対象部分	期 間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。